



MEGO AFEK  
AC LTD.

# Ballancer®

# Ballancer®



Ballancer® è un sistema che rivoluziona il trattamento della compressione estetica (pressomassaggio strumentale).

Offe una varietà di soluzioni scientificamente collaudate, facili da applicare e progettate per soddisfare tutte le esigenze della propria clientela.

Ballancer® è un trattamento completo che tonifica e rinvigorisce la pelle, accelera la rimozione delle scorie nella linfa, snellisce i contorni del corpo e crea una sensazione di relax e benessere. Con i nostri esclusivi e innovativi capi, progettati per il massimo comfort del cliente, Ballancer® è una soluzione perfetta per il mercato estetico!



JAS MEDICAL  
Health and Beauty Service

Distributore per l'Italia:

Jas Medical Srl, Via G. Garibaldi 16, 20851 Lissone (MB)

Tel: 039 2621072—329 0708969 Fax: 039 3306696

E-Mail: [info@jasmedical.it](mailto:info@jasmedical.it) Website: [www.jasmedical.it](http://www.jasmedical.it)

Mego Afek sviluppa e produce sistemi di trattamento che migliorano la salute e la qualità della vita dei pazienti che vivono con linfedema cronico, insufficienza venosa, ferite croniche, altre malattie circolatorie periferiche. Aiuta gli atleti a raggiungere i loro obiettivi di prestazioni e con il sistema **Ballancer®** dà agli estetisti strumenti per soddisfare i loro clienti più esigenti.

## Benefici del trattamento Ballancer®



**Riduce il volume nelle aree di ritenzione idrica in eccesso, riducendo visibilmente il volume di gambe, fianchi e pancia, tonificando i contorni.**

**Rassoda, ridefinisce e tonifica la pelle per un look fresco e giovane.**

**Alla fine della sessione i clienti avvertono un senso di relax e benessere.**

## Sommario

<b>Ballancer® 505V2 .....</b>	<b>pag.4</b>
<b>Ballancer® 606 .....</b>	<b>pag.5</b>
<b>Ballancer® Gold .....</b>	<b>pag.6</b>
<b>Ballancer® Jacket .....</b>	<b>pag.7</b>
<b>Ballancer® pants .....</b>	<b>pag.8</b>
<b>Controindicazioni e Precauzioni particolari .....</b>	<b>pag.9</b>
<b>Mego Afek e Indirizzo del produttore .....</b>	<b>pag.10</b>
<b>Jas Medical Srl e Indirizzo del Distributore per L'Italia .....</b>	<b>pag.11</b>

## Ballancer® 505V2

Con le sue esclusive caratteristiche e semplicità d'uso Ballancer® 505V2 è ideale per i Centri di Bellezza, studi e centri benessere.

Ballancer® 505V2 offre le seguenti modalità di trattamento: **l'esclusivo Pretrattamento, Ballancer® e Wave.**

Il ciclo di Pretrattamento è un primer per il trattamento principale. Decongela prima il tronco, per massimizzare i risultati della sessione di trattamento che segue (Ballancer® o Wave). Man mano che la sequenza progredisce, inizia la compressione muovendosi verso il basso nell'arto.

Una volta che il ciclo di pretrattamento è finito, **Ballancer® 505V2** applica uno dei cicli peristaltici selezionati:

- ciclo a Wave -massaggio a onda lungo, profondo e lento
- ciclo Ballancer® – carezze superficiali, peristaltiche rapide e veloci

**Ballancer® 505V2** è compatibile con i nostri esclusivi capi;

[Ballancer® Jacket](#) e [Ballancer® pants](#)



### SPECIFICHE

Modello	Ballancer® 505V2, Model 1201-EC
Ciclo	Pretratmento, Ballancer®, Wave
Range Pressione	20-80 mmHg
Peso/dimensioni	6.7 Kg / 19 x 31x 38 cm
Voltaggio	120V-230V 50/60 Hz

## Ballancer® 606

**Il Ballancer® 606 è il sistema più avanzato sul mercato, facile da usare, con caratteristiche uniche e modalità di trattamento innovative.**

Il ciclo esclusivo di Pretrattamento è un primer per il trattamento principale. Decongiona prima il tronco, per massimizzare i risultati della sessione di trattamento che segue (**Ballancer®**, **Wave**, **Slim**). Man mano che la sequenza progredisce, inizia la compressione muovendosi verso il basso nell'arto. Una volta che il ciclo di pretrattamento è finito, **Ballancer® 606** applica uno dei cicli selezionati:

**Wave** – massaggio peristaltico a onda lungo, profondo e lento;

**Ballancer®** – carezze peristaltiche rapide, superficiali e veloci;

**Slim** – massaggio peristaltico più intensivo.

### Caratteristiche esclusive del Ballancer® 606

- Touchscreen facile da usare;
- Programmi di trattamento preimpostati;
- Salva e gestisce le liste dei clienti e i loro trattamenti.

**Ballancer® 606** è compatibile con i nostri esclusivi capi;

[Ballancer® Jacket](#) e [Ballancer® pants](#)



### SPECIFICHE

Modello	Ballancer® 606, Model 1202-ED
Ciclo	Pretrattamento, Ballancer®, Wave, Slim
Range Pressione	20-80 mmHg
Peso/dimensioni	7 Kg / 17 x 38x 31 cm
Voltaggio	230V 50/60 Hz

## Ballancer® GOLD

**Ballancer® Gold fa parte della nostra linea di prodotti estetici di nuova generazione e offre nuove funzionalità avanzate e nuove modalità di trattamento tra cui: Pretrattamento, Ballancer® e Intense.**



L'esclusivo ciclo di pretrattamento è un'anticipazione per il trattamento principale. Decongiona prima il tronco per massimizzare i risultati dei trattamenti **Ballancer®** o **Intense**.

Con la progressione della sequenza, inizia il massaggio muovendosi verso il basso nell'arto. Una volta che il ciclo di pretrattamento è finito, **Ballancer® Gold** applica uno dei cicli selezionati:

- **Ballancer®** : massaggio a onda rapido, superficiale e veloce;
- **Intense** – massaggio più intenso, sequenziale

Caratteristiche del **Ballancer® Gold**

- Innovativo, facile da usare;
- Nuovo software **Ballancer® Gold** per PC per la creazione e la gestione del protocollo di lavoro, tra cui un facile trasferimento alla console **Ballancer® Gold** tramite unità USB;
- Salva e gestisce le liste dei clienti e i loro trattamenti individuali.

**Ballancer® 606** è compatibile con i nostri esclusivi capi;

### SPECIFICHE

Modello	Ballancer® Gold
Ciclo	Pretrattamento, Ballancer®, Intense
Range Pressione	20-80 mmHg
Peso/dimensioni	6 Kg / 17 x 31x 38 cm
Voltaggio	100V-240V 50/60 Hz

## Ballancer® Jacket

I nostri capi innovativi, esclusivi e protetti da brevetto sono famosi in tutto il mondo per la loro alta qualità, il trattamento ottimale e il comfort. Siamo orgogliosi di avere la leadership nella ricerca e nell'offerta di capi innovativi.

Progettato per il massimo comfort del cliente, **Ballancer® Jacket** tratta l'intera parte superiore del corpo:

1. 24 camere sovrapposte per un trattamento regolare ed efficace;
2. Facile da indossare e togliere, proprio come una giacca normale;
3. Tessuti robusti e resistenti facili da mantenere e da pulire.



## Ballancer® Pants

I nostri capi innovativi, esclusivi e protetti da brevetto sono famosi in tutto il mondo per la loro alta qualità, il trattamento ottimale e il comfort. Siamo orgogliosi di avere la leadership nella ricerca e nell'offerta di capi innovativi.

**Ballancer® Pants** è protetto da brevetto ed è progettato per un trattamento completo della parte inferiore del corpo con il massimo comfort del cliente;

- 24 camere di compressione sovrapposte per un massaggio fluente e confortevole;
- **Ballancer® Pants** può essere indossato dalla maggior parte delle persone grazie al suo design particolare (anche obesi);
- La funzione brevettata "custom boot", forma uno stivale adatto alla lunghezza delle gambe di ogni paziente.
- Facile da usare - come indossare un paio di pantaloni!





## Controindicazioni e Precauzioni particolari.

*Il **Ballancer**<sup>®</sup> è un dispositivo di massaggio estetico pneumatico altamente efficace che funziona a pressioni fino a 80 mmHg. A causa della pressione applicata, l'operatore del dispositivo **Ballancer**<sup>®</sup> (o l'utente, se **Ballancer**<sup>®</sup> è utilizzato direttamente) deve verificare prima dell'inizio del trattamento che la persona che deve essere trattata non soffra di nessuna delle controindicazioni elencate di seguito.*

*Si prega di esaminare attentamente l'elenco delle controindicazioni e di assicurarsi che la persona da trattare con **Ballancer**<sup>®</sup> non abbia nessuna di queste controindicazioni.*

*Nella parte posteriore del Manuale d'uso troverete un Questionario di screening, che ha lo scopo di aiutarvi a rilevare eventuali controindicazioni.*

*Seguire le istruzioni per il completamento del questionario. Se non siete sicuri che vi siano presenti una o più di queste controindicazioni, la persona da trattare deve consultare un medico prima di essere trattato con il **Ballancer**<sup>®</sup>.*

***L'uso del **Ballancer**<sup>®</sup> non è raccomandato quando sono presenti le seguenti condizioni :***

**Dolore e intorpidimento che non sono stati valutati da un medico;**

**Malattia vascolare ischemica tra cui dolore a riposo e gangrena;**

**Insufficienza cardiaca congestizia incontrollata o malattia cardiaca instabile;**

**Conosciuta o sospetta trombosi venosa profonda infetta;**

**Ferita infetta o aperta.**

**Avvertenze.**


L'area addominale non deve essere trattata durante la gravidanza. Se **Ballancer**<sup>®</sup> deve essere utilizzato durante la gravidanza, le camere d'aria sopra l'addome (camere 10, 11 e 12) devono essere scollegate e chiuse prima dell'uso. A causa del movimento dei fluidi nel corpo quando si utilizza il dispositivo, fare attenzione con i pazienti che hanno malattie cardiache. Inoltre, l'uso di alta pressione non è raccomandato per i clienti affetti da malattia di occlusione periferica.

**Ballancer**<sup>®</sup> funziona a pressioni fino a un massimo di 80 mmHg. L'operatore del dispositivo **Ballancer**<sup>®</sup> deve verificare prima dell'inizio del trattamento che la persona da trattare non soffra di nessuna delle condizioni di cui sopra.

In caso di incertezza sulla presenza di una controindicazione, la persona da trattare deve consultare il proprio medico prima del trattamento.

Consultare il Manuale dell'utente per ulteriori note e precauzioni.

**Leader per la Terapia di compressione pneumatica  
per il miglioramento circolatorio**

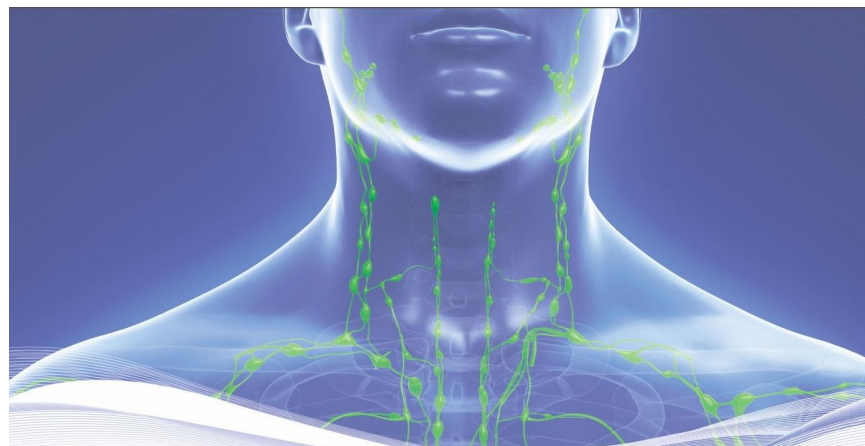

Mego Afek AC Ltd.  
Kibbutz Afek 3004200  
Israel  
Tel: 972-77-9084277  
Fax: 972-4-8784148  
E-mail: [info@meogoafek.com](mailto:info@meogoafek.com)  
Web: [www.meogoafek.com](http://www.meogoafek.com)

**Jas Medical, forte di una esperienza ultra-decennale nel mondo dei dispositivi medici, attraverso la continua ricerca di nuovi prodotti e lo sviluppo di nuovi campi di applicazione offre al paziente e all'operatore medico e paramedico soluzioni sempre più efficaci e innovative, nel rispetto della qualità e dello stile di vita delle persone.**

**Jas Medical, per mezzo del know how del proprio staff tecnico, si pone nei confronti dell'operatore medico e paramedico come partner altamente qualificato per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, facendosi interprete delle sue esigenze per contribuire al miglioramento della qualità della vita del paziente.**



Jas Medical Srl

Via Giuseppe Garibaldi 16

20851 Lissone (MB)

Tel: 039 2621072 /329 0708969

Fax: 039 3306696

E-mail: [info@jasmedical.it](mailto:info@jasmedical.it)

Web: [www.jasmedical.it](http://www.jasmedical.it)